



MODEL: GBS1502-MB

SRB

VAGA ZA MERENJE TELESNE TEŽINE

UPUTSTVO ZA KORIŠTENJE

**PAŽNJA!**

**PRE UPOTREBE, PAŽLJIVO PROČITAJTE UPUTSTVA KOJA SU NAVEDENA U PRILOŽENOM PRIRUČNIKU.**

**PAŽNJA!**

**POŠTUJTE SVE BEZBEDNOSNA UPUTSTVA I BEZBEDNOSNE MERE!**

**UPOZORENJE**

Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu zbog nepravilnog korišćenja aparata, nepravilnog održavanja i intervencije na aparatu, sa ciljem zamene delova ili izmene. Intervencije na aparatu može izvoditi samo ovlašćeni serviser proizvođača aparata.

**UPOZORENJE**

Priručnik nemojte baciti. Čuvajte ga za kasniju upotrebu (npr. kod prenosa vlasništva)! **PROČITAJTE I SHVATITE SVA UPUTSTVA I UPOZORENJA, KOJA SU NAVEDENA U PRIRUČNIKU!**

**KORESPODENCIJA**

U slučaju pisanja ili telefonskog razgovora sa vašim prodavcem ili proizvođačem radi bilo kojeg razloga, koji se tiče aparata, uvek navedite sledeće podatke:

- 1) Model-tip aparata
- 2) Serijski broj
- 3) Napon i frekvenciju
- 4) Datum kupovine
- 5) Ime-naziv prodavača, gde ste aparat kupili
- 6) Tačan opis greške ili kvara

**Iskra**

Aparat može koristiti samo za to osposobljena osoba, koja je pročitala uputstva i koja je svesna rizika koji proizilaze iz njegovog korišćenja.

**UPOZORENJE**

**Nepoštivanje uputa i upozorenja koja su navedena u ovom priručniku, može dovesti do strujnog udara, požara i/ili do vrlo ozbiljnih povreda.**

**U slučaju korišćenja aparata gde njegovi metalni delovi dolaze u kontakt sa skrivenim električnim vodovima ili vlastitim električnim kablom (ako je ugrađen), aparat uvek držite za plastičnu izolacijsku ručku.**

**UPUTSTVA O BEZBEDNOSTI**

Pri korišćenju električnog aparata poštujujte sledeća bezbednosna upozorenja, kako bi smanjili opasnost od požara, električnog šoka i ličnih povreda.

**KORIŠĆENJE U SKLADU SA PROPISIMA**

Za korišćenje koje nije u skladu sa propisima, kao što su npr. neovlašćene izmene na aparatu, proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost.

Takođe poštujujte bezbednosna uputstva, uputstva za montažu i uputstva za korišćenje, kao i opšte važeće propise o sprečavanju nesreća.

## **VAŽNA UPUTSTVA**

Aparat nije namenjen za korišćenje u komercijalne svrhe. Ova uputstva pažljivo čuvajte i po potrebi prosledite sledećem korisniku. Pre nego što počnete koristiti vaš aparat, važno je da pročitate i sledite uputstva, koja trebaju biti pri ruci za kasniju upotrebu. Obratite posebnu pažnju na dio koji se odnosi na „Vaša bezbednost”.

### **Za vašu bezbednost**

- Uređaj smeju koristiti deca stara najmanje 8 godina i osobe, koje imaju ograničene fizičke ili mentalne sposobnosti, ili koje nemaju dovoljnog znanja i iskustva, samo ukoliko ih neko pri korišćenju nadzire ili ako ih je osoba, koja je odgovorna za njihovu bezbednost, podučila radu i korišćenju uređaja.
- Ne dozvolite da se deca igraju sa ambalažnom folijom. Tokom igre postoji mogućnost gušenja.
- Ne prekoračujte najviše dozvoljeno opterećenje.
- Uređaj pre svakog korišćenja proverite. Ukoliko je oštećen, uređaj ne koristite.
- Uređaj ne potapajte u vodu ili druge tekućine.
- Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorima. Ne koristite ga na kiši.
- Uređaj odložite na način da ne može pasti u kadu ili umivaonik.
- U kućište uređaja nemojte gurati bilo kakve predmete.
- Uređaj postavite na ravnu, suhu i dovoljno stabilnu površinu.
- Uređaj ne izlažite visokim temperaturama (npr. peći) ili vremenskim uticajima (npr. kiši). U kućište ne ulivajte tekućinu.
- Uređaj nemojte koristiti ako mu je kućište razbijeno, slomljeno ili deformisano.
- Uređaj ne menjajte i ne radite izmene na bilo koji način. Uređaj koristite samo na način, kako preporučuje proizvođač.
- Pazite da vam uređaj ne padne, pored toga ne udarajte po njemu i ne izlažite ga jakim vibracijama ili magnetnom polju.
- Ako ne koristite uređaj duže vreme, nemojte ga opterećivati i ne stavljajte bilo kakve predmete na njega.

### **UPUTSTVA ZA RUKOVANJE BATERIJOM**

#### **UPOZORENJE!**


**Ako deca ili životinje progutaju bateriju, mogu ozbiljno ugroziti svoje zdravlje.**

- Baterije čuvajte na mestima koja nisu dostupna deci i životinjama.
- Iskorišćene baterije i baterije iz kojih je istekla baterijska kiselina, bacite u skladu sa važećim propisima.
- Ako dete ili životinja proguta bateriju, odmah zatražite lekarsku pomoć!

#### **Posebna bezbednosna upozorenja**

- Na uređaj nemojte stati mokrim stopalima. Uređaj takođe neka bude suv pre nego što stanete na njega.
- Pre nego što stanete na uređaj, izujte se.
- Nikada ne skačite na uređaj niti dozvolite da padne na tlo kada ga premeštate.
- Uređaj čistite vlažnom krpom. Uređaj ne potapajte u vodu.
- Uređaj ne izlažite vrućini ili ekstremnoj hladnoći.

## EKTRAN

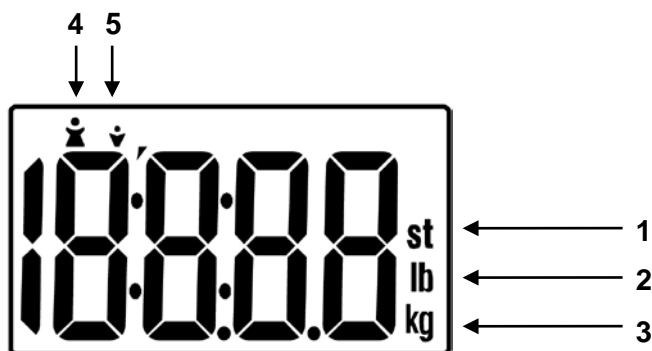

Dugmetom na donjoj strani uređaja možete birati jednu od tri različite merne jedinice:

1. Kamen
2. Funta
3. Kilogram
4. Vaša težina
5. Odbitak

## KORIŠĆENJE

## Pre prve upotrebe

- Odstranite celu ambalažu.
- Odstranite odeljak za bateriju na donjoj strani uređaja i odstranite plastičnu traku između baterije i kontakta.
- Zatvorite odeljak za bateriju, tako da se čuje zatvaranje poklopca.

## Upozorenje!

**Ne prekoračujete najviše dozvoljeno opterećenje uređaja koje iznosi 150 kg.**

## Upozorenje!

**Na uređaj nemojte stati mokrim stopalima. Uređaj takođe neka bude suv pre nego što stanete na njega.**

## Korišćenje




- Uređaj postavite na ravnu površinu.
- Oprezno stanite na uređaj. Stojte što je više moguće na sredini uređaja i ravno se držite.
- Vaša izmerena težina će se prikazati na ekranu.

Za najtačnije rezultate, preporučujemo da se vagate svaki dan u približno isto vreme.

## Korišćenje funkcije TARE

Funkcija tare omogućava vaganje odbitka ili odbitak težine. Ova funkcija omogućava brzo i jednostavno vaganje težine bebe. Uz ovu funkciju takođe možete vagati kućne ljubimce ili predmete.

**Napomena: Ne stavljajte dojenčad ili životinje na aparat.**

1. Aktivirajte funkciju tare pritiskom na dugme  ispod LCD ekrana.
2. Pažljivo stanite na aparat (bez dodate težine). Vaša težina biće prikazana na ekranu.  
Na ekranu će se pojaviti simbol , koji označava da aparat pokazuje vašu težinu.
3. Stupite sa aparata i ponovno stanite na aparat sa dodatom težinom.
4. LCD ekran će zatreperiti i prikazati izmerenu dodatnu težinu.  
Na ekranu će se pojaviti simbol , koji označava da aparat pokazuje odbitak.

## Isključivanje

- Uređaj će se sam isključiti nakon nekoliko sekundi mirovanja.

## ZNAKOVI UPOZORENJA

- Ako ekran prikazuje »Lo«, to znači da je baterija prazna. U tom slučaju zamenite bateriju na zadnjoj strani uređaja.
- Ako ekran prikazuje »Err«, to znači da je došlo do preopterećenja.

## ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

### PAŽNJA!

**Uređaj ne potapajte u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.**

- Za čišćenje uređaja ne koristite gruba sredstva za čišćenje.
- Uređaj čistite vlažnom krpom i pustite ga da se osuši.
- Uređaj nije namenjen korišćenju za profesionalne namene.
- Uređaj čuvajte u suvom prostoru, van dohvata dece.

## SERVISIRANJE

Za bilo kakvo servisiranje za vreme garancije ili nakon njenog isteka, obratite se ovlašćenom servisu i rado ćemo vam pomoći.

**Pre nego što uređaj predate na servis, mora biti očišćen od svih nečistoća i u originalnoj ambalaži.**

## TEHNIČKI PODACI

Model:	Najveća dozvoljena težina:	Napajanje:
GBS1502-MB	150 kg	2 x CR2032 3V Litijska baterija

**25**  
meseci  
garancije

## GARANTNI list

Garantni list Vam garantuje besplatnu popravku proizvoda čiji je uvoznik Elementa d.o.o., saglasno sa uslovima opisanim u garantnom listu. Ukoliko proizvod pokaže neispravnost u toku garantnog roka, molimo obratite se prodavnici gde je uređaj kupljen na teritoriji Republike Srbije.

**Pre nego što počnete sa korišćenjem uređaja pročitajte kompletno uputstvo za rukovanje i uslove garancije. U slučaju da primetite napravilnost u radu, uređaj vratite u prodavnicu na mesto kupovine.**

**Podaci o servisu**

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: \_\_\_\_\_

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: \_\_\_\_\_

Period za koji se produžuje garancija: \_\_\_\_\_

**Napomena:** \_\_\_\_\_

**M.P.**
**Podaci o servisu**

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: \_\_\_\_\_

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: \_\_\_\_\_

Period za koji se produžuje garancija: \_\_\_\_\_

**Napomena:** \_\_\_\_\_

**M.P.**
**Podaci o servisu**

Popunjava ovlašćeni servis

Datum prijema u servis: \_\_\_\_\_

Uređaj popravljen i vraćen kupcu	<input type="checkbox"/>
Uređaj ne može da se popravi i izdaje se novi	<input type="checkbox"/>
Uređaj nema pravo reklamacije, greška prouzrokovana nestručnim rukovanjem	<input type="checkbox"/>
Uređaj je testiran i ustanovljeno je da je ispravan	<input type="checkbox"/>

Datum izdavanja iz servisa: \_\_\_\_\_

Period za koji se produžuje garancija: \_\_\_\_\_

**Napomena:** \_\_\_\_\_

**M.P.**

## Podaci o proizvodu

Popunjiva prodavac

Naziv proizvoda:	
Oznaka modela:	
Serijski broj:	

## Podaci o prodaji

Prodajni objekat:		Pečat prodavca
Mesto:		
Potpis prodavca:		

## Broj reklamacije

(\* podaci iz knjige reklamacija)

Datum:

Reklamacioni broj:

Reklamacija 1.		
Reklamacija 2.		
Reklamacija 3.		

**Uvoznik  
Elementa d.o.o.**Jovana Mikića 56, 24000 Subotica  
Tel:024/686-270, www.elementa.rs**Ovlašćeni servis**Elementa d.o.o.  
Jovana Mikića 56, 24000 Subotica  
Tel:024/686-270  
www.elementa.rs



## Uslovi garancije

Izjavljujemo da je kupljeni proizvod u potpunosti saobrazan opisu, kao i da ima svojstva koja su pokazana na uzorku ili modelu. Takođe izjavljujemo da ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste, te da i po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe datim od strane proizvođača kako je učinjeno na ambalaži robe. Izjavljujemo da će proizvod ispravno funkcionisati i da ćemo u slučaju nedostataka i kvarova na proizvodu koji su posledica nesaobraznosti, kvarove otkloniti pod uslovom da su nastali u garantnom roku, pri normalnoj upotrebi uređaja i pridržavanju njegovog uputstva o rukovanju. Izjavljujemo da će proizvod biti saobrazan opisu kakav je bio u momentu prodaje 25 meseci od dana kupovine. Garancija važi za proizvode kupljene na teritoriji Srbije te se može ostvariti reklamacijom učinjenom u Srbiji.

### Prava iz garancije potrošač može ostvariti izjavljivanjem reklamacije pod sledećim uslovima:

1. Da vrati uređaj u celovitom stanju i u slučaju visokog stepena lomljivosti poželjno je dostaviti u ambalaži
2. Da je tačno i uredno popunjen garantni list
3. Da je priložen račun o kupovini uređaja

Po izjavljivanju reklamacije, trgovac će u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije odgovoriti potrošaču sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu i predlogom njegovog rešavanja.

### Reklamacija se neće prihvatiti u sledećim slučajevima:

1. Ukoliko uređaj nije dostavljen sa garantnim listom i računom
2. Ukoliko je uređaj fizički odnosno mehanički oštećen
3. Ukoliko je grešku prouzrokovala nestručna montaža i nesavesno rukovanje
4. Ukoliko se sa uređajem nije postupalo prema uputstvu za upotrebu, ili se uređaj skladištio na neprikladnom mestu
5. Ukoliko je uređaj otvaran, rastavljan ili prepravljivan od strane neovlašćenih lica
6. U slučajevima kada je do kvara došlo višom silom – elementarnim nepogodama (udar groma, požar, variranje u naponu...)

### Obaveštavamo vas o pravima potrošača:

Ako isporučena roba nije saobrazna, potrošač ima pravo da zahteva od trgovca da se otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine kupoprodaju u pogledu te robe.

Potrošač, na prvom mestu, može da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu prethodnim stavom nije moguće ili ako predstavlja nesrazmerno opterećenje za trgovca, potrošač može da zahteva umanjenje cene ili da izjavi da raskida ugovor.

Nesrazmerno opterećenje za trgovca u smislu prethodnog stava, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir:

1. vrednost robe koju bi imala da je saobrazna
2. značaj saobraznosti u konkretnom slučaju;
3. da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih neugodnosti za potrošača.

Ukoliko je uređaj reklamiran u prvih 6 meseci potrošač ima pravo da bira između povrata novca, zamene uređaja i opravke.

Svaku opravku ili zamenu ćemo izvršiti u roku koji će biti definisan u Obaveštenju o rešavanju reklamacije koje sadrži izjašnjenje ovlašćenog servisa, a maksimalno u roku od 30 dana. Sve troškove koji su neophodni da bi se roba popravila, a naročito troškovi rada, materijala, preuzimanja i isporuke, snosi trgovac.

Potrošač ima pravo da raskine ugovor, ako ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu u obećanom roku ili ako trgovac nije izvršio opravku ili zamenu bez značajnijih nepogodnosti za potrošača.

Za obaveze trgovca koje nastanu usled nesaobraznosti robe, proizvođač se prema potrošaču nalazi u položaju jemca.

Potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna.

Prava na opravku ili zamenu ili umanjenje cene, odnosno raskid kupoprodaje, ne utiču na pravo potrošača da zahteva od trgovca naknadu štete koja potiče od nesaobraznosti, u skladu sa opštim pravilima o odgovornosti za štetu.

Svi uređaji pripadaju tkz. grupi hobista, odnosno, namenjeni su za kućnu, hobi upotrebu.

U slučaju da je korišćenje bilo za profesionalne aktivnosti garancija se neće prihvatiti.

Iz garancije su izuzeti uređaji ili delovi uređaja koji imaju potrošni karakter.

Potrošni karakter imaju delovi ili uređaji koji korišćenjem dovode do habanja ili trošenja istih.

Pod ograničenu garanciju od 6 meseci spadaju: punjive baterije, štedljive sijalice, LED sijalice i cevi, fluo cevi.

Iz garancije su izuzeti: baterije, halogene i sijalice sa užarenim vlaknima, sijalice u lampama i reflektorima, vrhovi i grejači lemilica, grejači u kvarcnim i halogenim grejalicama, bilo koja vrsta sofvera (pod garanciju spada samo hardver).

**Molimo da pročitate dodatne napomene o rukovanju koje se nalaze u uputstvu za rukovanje.**